

# 調剤監査支援システム MediMonitorの提案



監査の必要性について



メディカルフィールズ  
Medical Fields

# MediMonitor(メディモニター)とは

医薬品の種類と数が正しいかを機械によって判別させるシステムです

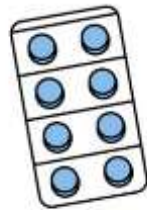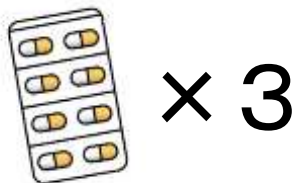

× 3 ×



× 2 ×




× 3 ○



# 監査の流れ

## 入力

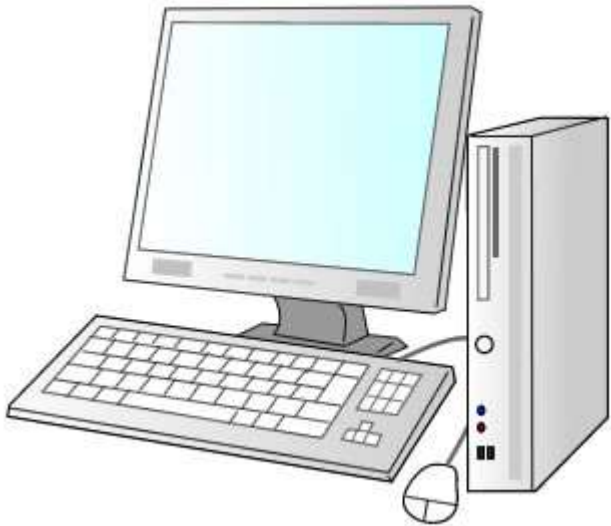

レセプトでの入力  
が終わると

## 表示



患者情報が表示  
されます

# 監査の流れ

## 種類



スマホ内蔵カメラ or バーコードリーダー

種類は医薬品にある**バーコード**を読み取って特定します

## 数



 × 10  
約0.1g  
||



約1.0g


電子はかりで確認

数は医薬品の比重から計算された**重量**と一致するかで判別します

※重量監査はオプションです

# 具体的な監査手順

散剤,軟膏,水剤  
外用にも対応

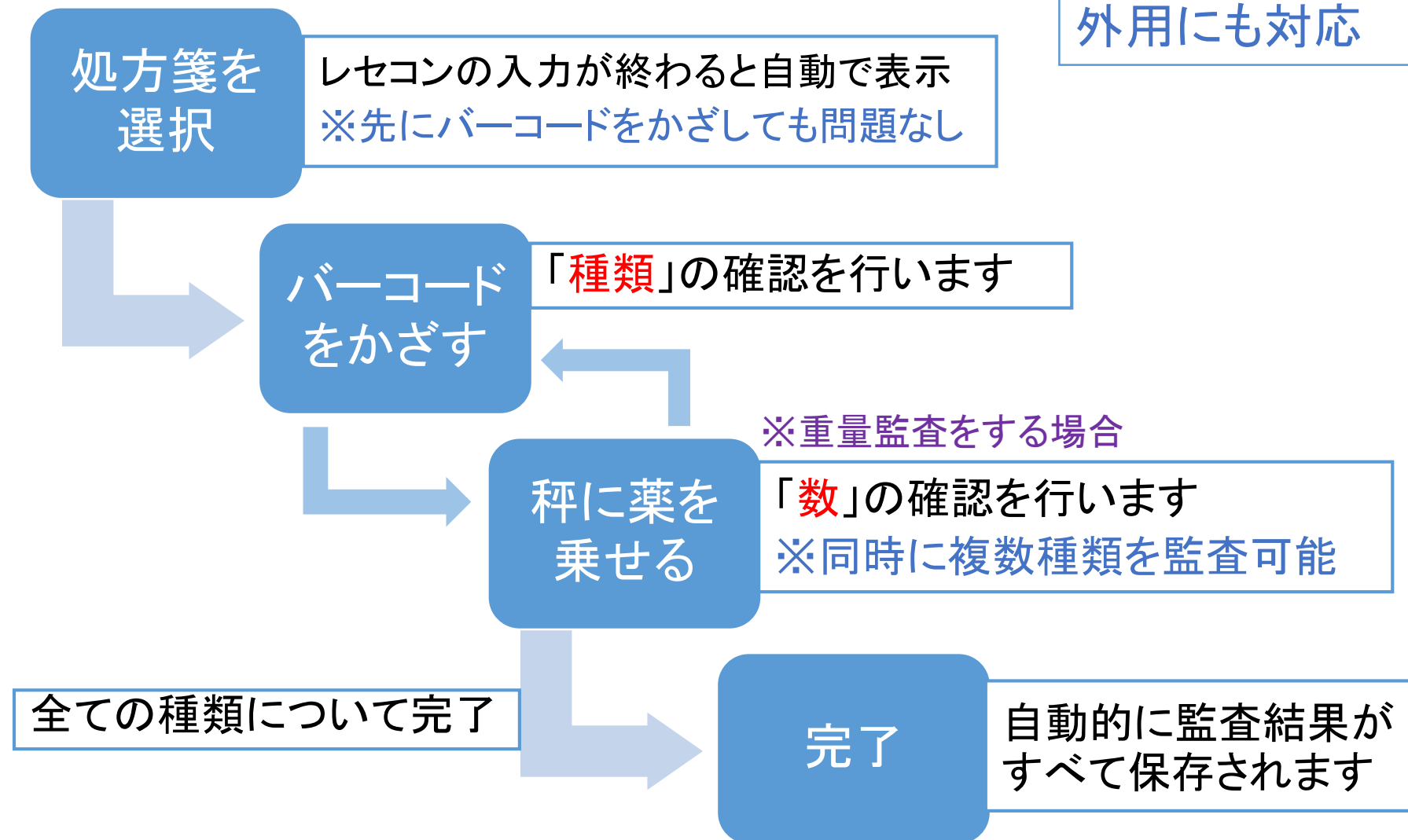

# MediMonitor(メディモニター)について

## よくある誤解

作業が増えるのでは？

監査に時間がかかりそう

操作が難しそう

機械は信用できない



# よくある疑問



作業が増えるのでは？



作業は増えません！  
むしろ減ります

- ・今まで人が監査していたものを機械で監査できるようになります  
⇒人が監査する作業が減ります！
- ・投薬ミスが減るので調剤過誤が少なくなります  
⇒過誤に対応をする作業が減ります！

# よくある疑問



操作が難しそう



スマホと同じ、直感的な操作  
が可能！



パソコンとは違い、普段使い  
慣れているスマートフォンと  
同じ直感的な操作が可能！





# よくある疑問



監査に時間がかかりそう



人より早く監査ができます！

人の監査の場合：**約6秒**

・医薬品を手にする(1秒)→種類、規格を見る(1秒)→数を見る(2秒)→処方箋に書かれている医薬品の種類、規格を見て正しいか確認(1秒)→処方箋に書かれている数を計算して正しいか確認(1秒)

監査システムの場合：**約4秒**

・医薬品を手にする(1秒)→バーコードをかざす(2秒)→秤の上に乗せる(1秒)

# よくある疑問



機械は信用できない



機械が間違える事は  
ほぼありません！

ミスの発生確率



$$\frac{1}{3,000,000}$$



$$\frac{1}{333}$$

- ・バーコードリーダーの誤認率は  
約1/3,000,000回 (Code39)※
- ・人間がミスをする確率は  
約1/333回※

※産業技術総合研究所のデータより

# 薬剤師の皆様に

監査システムは現場の薬剤師の  
負担を減らすシステムです！



でも...お高いんでしょう？

# 経営者の疑問



システムを導入しても金銭的な  
メリットがないのでは？



メリットはたくさんあります！  
導入すれば多くのコスト削減  
が見込めます！

# MediMonitorを導入すると

- ① 取り間違えによる**過誤**を減らせます
- ② 調剤ミスによる**破棄**を防げます
- ③ 薬を探す**時間**を減らせます
- ④ 監査のための**人件費**が下がります
- ⑤ 薬局の信頼性が上昇し、**クレーム**が減ります



**1年で100万円以上のコスト削減に**

# 調剤過誤による損失

- 薬局の信頼性の低下  
→患者数(処方数)の減少
- 調剤過誤による事故処理時間の増加  
→薬剤師が処理できる処方枚数の低下
- 誤った調剤による廃棄量の増加  
→破棄された医薬品は全て金銭的損失

一体いくらの  
**損失**が出てい  
るのか？



# モデルケース

- 1日100枚の処方箋
- 薬剤師は3人
- 導入前と導入後で調剤過誤を**90%**減らすことに成功



|          | 導入前        | 導入後       |
|----------|------------|-----------|
| 処方箋枚数    | 5,252      | 4,869     |
| ピッキング回数  | 18,550     | 16,749    |
| 別物間違い(%) | 54(0.29%)  | 0(0.00%)  |
| 数量間違い(%) | 104(0.56%) | 11(0.07%) |
| 調剤もれ(%)  | 26(0.14%)  | 1(0.01%)  |
| 合計(%)    | 184(0.99%) | 12(0.07%) |

※ミスゼロ子運用成果より

# 調剤過誤による損失

## 薬局の信頼性の低下


調剤過誤により  
1人が来なくなる



粗利益が  
約2,600円減



口コミによる  
効果は大きい

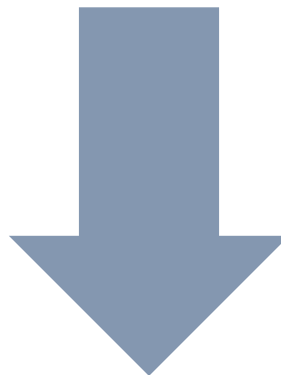

通院患者様の  
100人中の1人が  
また来なくなる


年間にとすると約60万円の損失に



# 調剤過誤による損失

## 調剤過誤による事故処理時間の増加

事故処理に  
月**2**時間

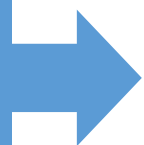

時間的損失

1日100枚×20日×0.001(事故比率)＝  
2件の事故×対応に60分かかる場合

薬剤師は高給のため処方業務に集中させるべきである



対応を間違えると訴訟も

薬剤師に2200円/時間※の費用がかかるとすると

年間にすると**約6万円の損失に**

裁判になった場合の**損失は無限大**

# 調剤過誤による損失

## 誤った調剤による廃棄量の増加



間違えると

すべて破棄に




10件に1件に上記の処方指示がある場合、年間の調剤過誤比率で計算すると

年間にすると**約15万円**の**損失**に

$1日100枚 \times 240日 \times 0.001(事故比率) \times 6000円(薬剤費)$

# 薬を探す時間

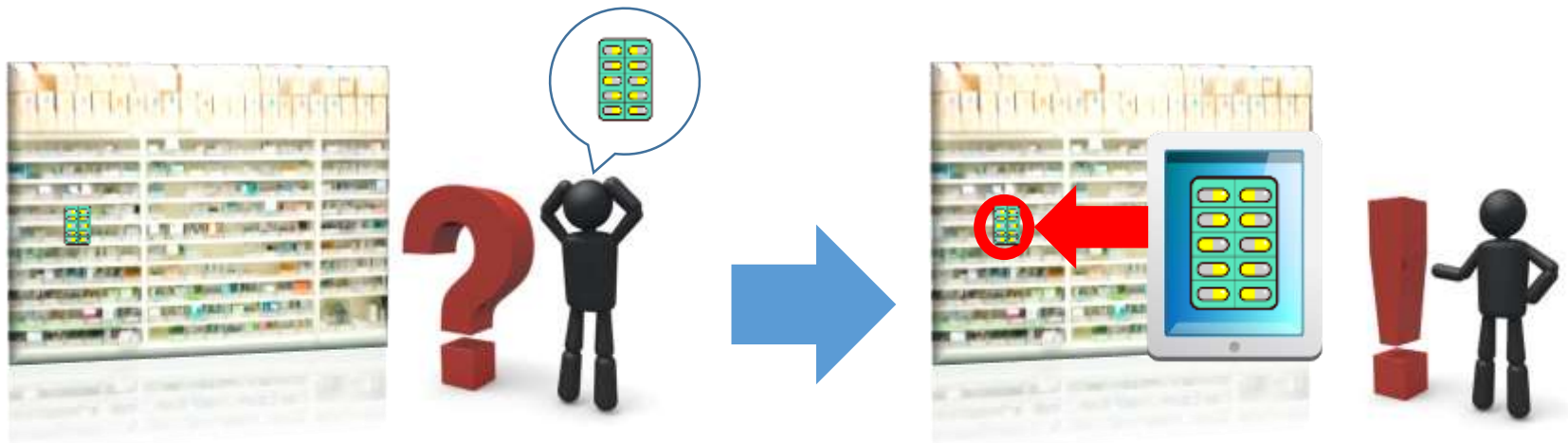

数が多くて場所がわからない

医薬品の場所を教えてくれる！

薬の場所はソフトが案内！


薬剤師に2200円/時間の費用、処方1枚当たり10秒の削減で計算すると

**年間にすると約15万円の削減に**

1日100枚 × 240日 × 10秒 × 0.61円(2200円/時間の1秒あたり給与)

# 監査に必要な人件費

## 薬剤師の監査負担の削減

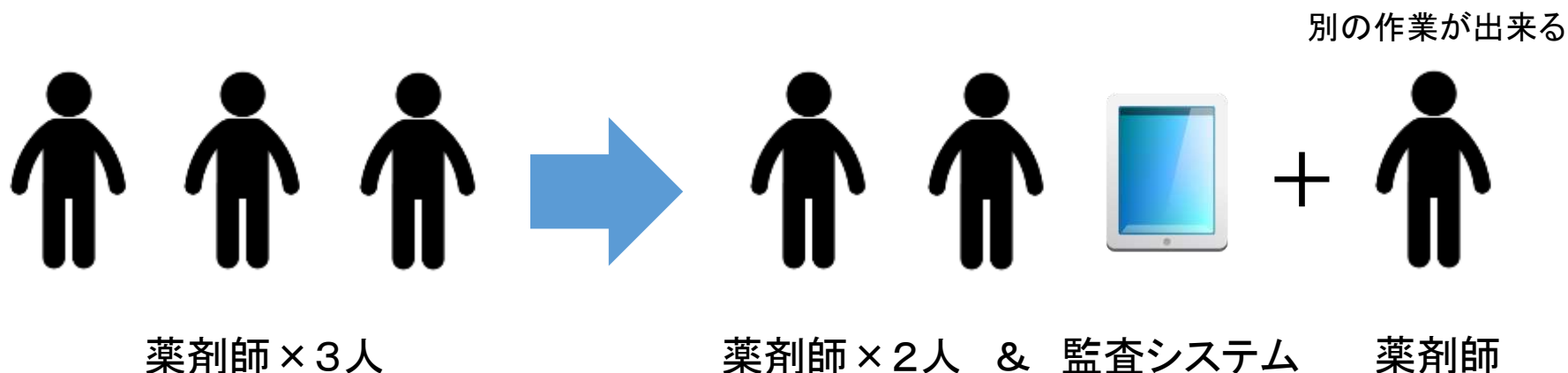

監査役薬剤師の負担を削減可能！

薬剤師に2200円/時間の費用、処方1枚当たり15秒の監査時間がかかるとすると

年間にすると**約20万円**の削減に

1日100枚 × 240日 × 15秒 × 0.61円(2200円/時間の1秒あたり給与)

# 添付文書表示機能




タッチ入力



音声検索



処方箋

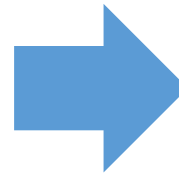

添付文書



インタビュー  
フォーム

- 医薬品の詳細がわからない場合に簡単に添付文書とインタビューフォームを表示可能
- そのままGoogleに検索をかけることもできる



**医薬品情報を探す時間が削減**

# 写真保存機能



ケータイと同じように写真が撮れる


自動的に写真を撮ることも可能

- カメラを使用して好きな写真を保存することが可能
- 監査時に自動的に写真を記録する設定も可能
- 写真は約60,000枚をネットに保存 ※上限に達したら古い写真から自動的に上書きされます
- ネットに保存しているため、どの端末からでも閲覧可能

**監査の証拠＋メモをする時間が削減**

# 新人が即戦力に

## 新人が抱える問題

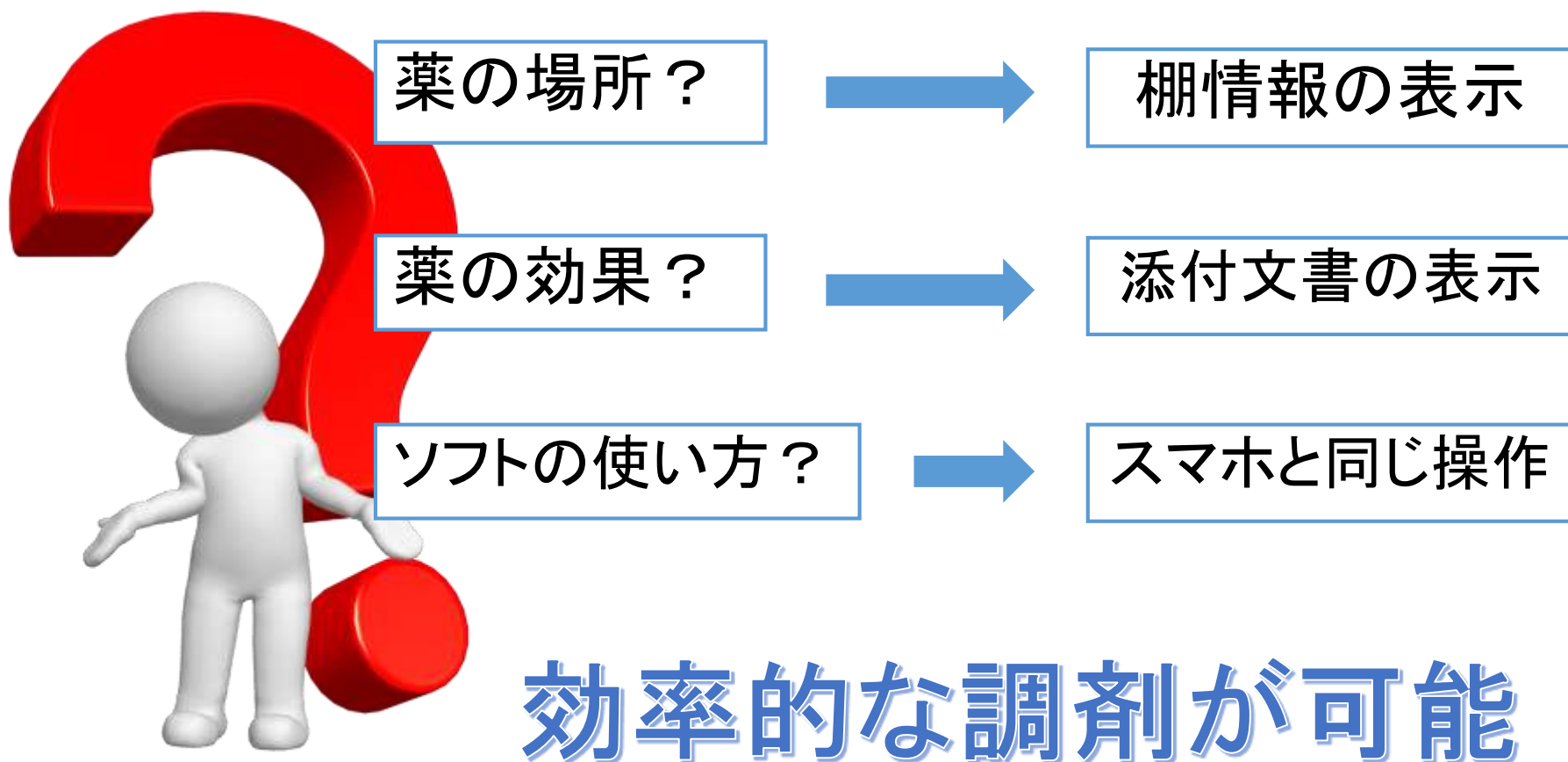

# MediMonitorは安価で導入可能！

監査システム導入で  
**100万円以上**のコスト削減が可能！

Q



でも...監査システムってお高いんでしょう？

A



MediMonitorなら安価で導入できます！



# MediMonitorは初期費用無料

## 初期費用なし！



## 監査に必要なのはAndroid端末だけです！

※インターネット接続が必要です



タブレット、スマホ両方に対応



内蔵カメラでバーコード読取

# MediMonitorは薬局ごとに対応可能

## 必要なら周辺機器を追加可能

錠数,散剤,軟膏,水剤監査が必要



電子はかりを使用した重量監査



※当社指定のA&D社の電子はかりとBluetoothまたはUSBで接続します

内蔵カメラのバーコード読取がイマイチ



外部バーコードリーダーを追加



※Bluetooth(SPP,HID)またはUSB(HID)に対応

# 必要なら一体型も使用可能

バーコードリーダー内蔵の

## ハンディターミナルも使用可能！

アプリをインストールするだけ！  
特別な設定は不要！



Unitech社 Android(PDA)全機種対応済み



Unitech P720

※Unitech社以外であってもAndroid搭載のハンディターミナルであれば対応可能ですので、ご連絡下さい

# MediMonitorは月額費のみでOK

店舗あたり

## 月々5,000円（税別）のみ！

※クレジットカードまたは銀行振込



## 店舗ごとの月額費のみで すべての機能が利用可能！



メンテナンス費



保守費



何台使用しても追加料金なし！

# MediMonitorは工事不要

アプリをインストールしてIDを作ったら

## 必要な設定はこれだけ！

1. レセコンに専用ソフトを入れる
2. 処方箋の連動設定をする

※レセコンのインターネット接続が必要です

MediMonitorレセコン連動ソフト

インストール



レセプトコンピューター



処方箋データの連動設定をする

# レセコンがインターネット未接続でも利用可！



レセコンがインターネットに繋がってない  
んだけど・・・



レセコンがオフラインでも中継機または  
サーバーを設置する事で使用できます！


※イメージ



レセコン  
(インターネット未接続)




中継用パソコン  
(インターネット接続済)

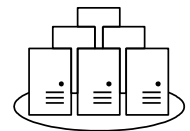

インターネットにある  
MediMonitorサーバー

詳しくはこちら→<https://medicalfields.jp/medimonitorprice/>

# MediMonitorの動作概要

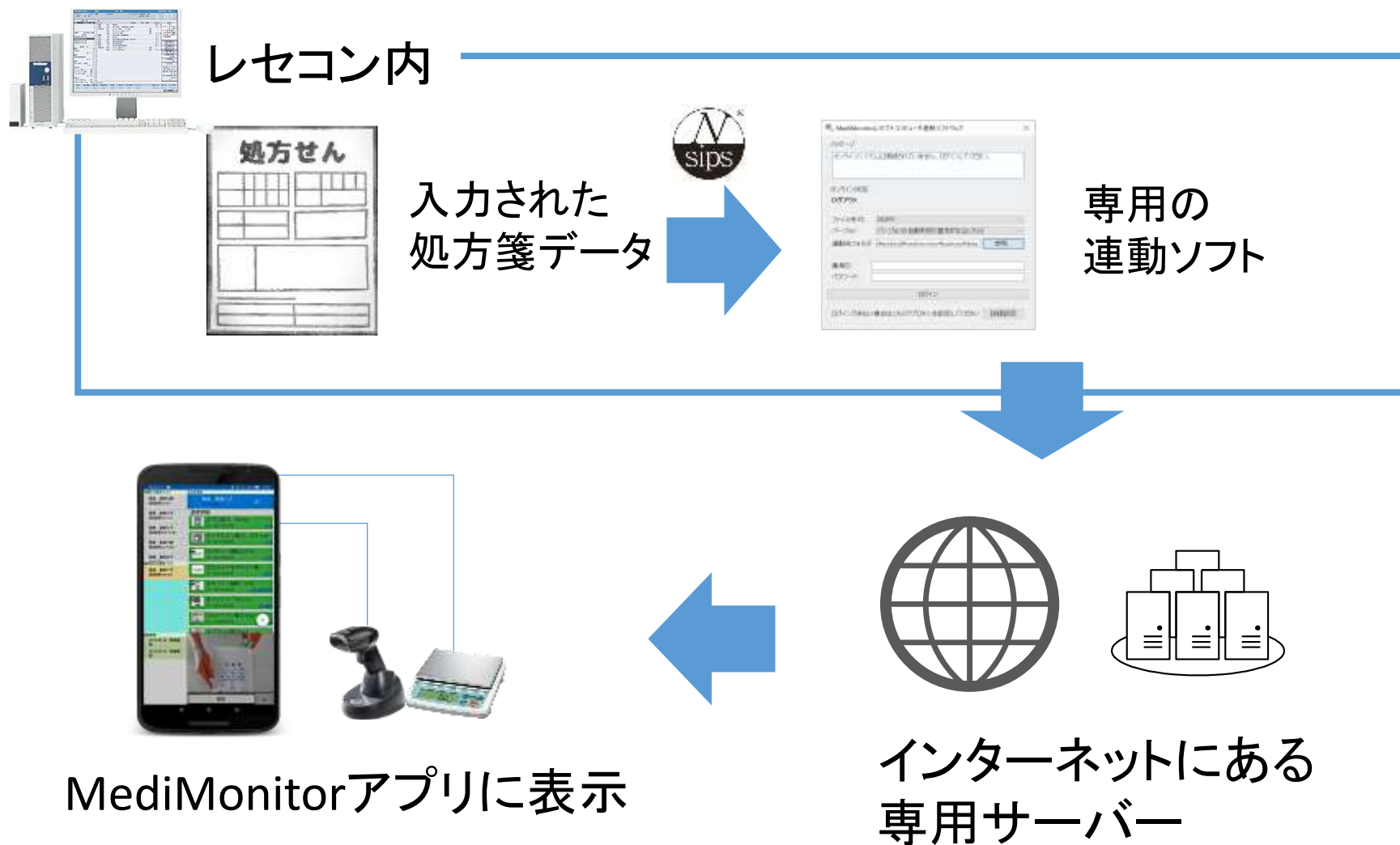

※MediMonitorシステムとレセコンとの連動にはNSIPSを利用しています。NSIPSは社団法人福岡県薬剤師会の登録商標です。(商標登録 第5214610号)



# MediMonitorの無料ダウンロード

今なら1ヶ月無料体験できます！

**無料ダウンロードはこちら！**

<https://medicalfields.jp/medimonitor/>





# 導入時によくある質問

- ・アプリやレセコンの連動設定をやって欲しい
- ・使い方が分からないから説明に来てほしい

➡ **有料出張サービスを行っております！**

**※交通費込30,000円(税別)**

北海道、沖縄、離島は別途交通費が必要な場合があります

お申し込みはこちら→<https://medicalfields.jp/contact/>



- ・Android端末,バーコードリーダー,電子秤も用意して欲しい

➡ **それぞれリース契約,当社販売を行っています！**

**※お見積りを致しますので、ご連絡ください**

価格の詳細、お申し込みはこちら→<https://medicalfields.jp/shop/>



- ・レセコンがインターネットに接続不可な場合は使えない？

➡ **薬局にサーバー設置をする事で利用できます！**

詳細はこちら→<https://medicalfields.jp/medimonitorprice/>



# 導入時によくある質問

## ・デモが見たい

➡ デモ専用ページを御覧下さい！

こちら→<https://medicalfields.jp/demo/>

※出張による現地でのデモをご希望される場合は、ご連絡下さい

お申し込みはこちら→<https://medicalfields.jp/contact/>

※出張デモは交通費が必要になる場合があります



## ・病院（院内薬局）、卸での利用は？

➡ 利用できる場合があります！

※JAHISに対応(β版),その他の連動方式は有料にて対応可(場合による)

※料金に関しては、通常のプランと異なります。

詳細はこちらよりご連絡下さい→<https://medicalfields.jp/contact/>



その他の質問はこちら→[https://medicalfields.jp/how\\_to\\_use\\_mm/](https://medicalfields.jp/how_to_use_mm/)

# 導入のお問い合わせ

導入のご相談はこちらにご連絡下さい！

✉ info@medicalfields.jp

メディカルフィールズ



その他にもご要望、ご意見などがありましたら遠慮なくご連絡下さい！

# 薬剤師の皆様に



安価で導入しやすいのは分かったけど、他の監査システムと比べてどうなの？



MediMonitorは性能も他社に負けていません！

# A社の監査システムとの比較

## A社製品の利点

- ・バーコードをかざす必要がない

## A社製品の欠点

- ・設置場所を広くとる必要がある
- ・水剤、散剤、軟膏の監査はできない
- ・シップ剤などのサイズが大きい医薬品の監査ができない、また出来たとしても重量監査でエラーが出ることが多い
- ・トレイに薬品を綺麗に並べる手間がある
- ・正しい医薬品を取っていても[間違い]と表示される事がある



# A社の監査システムとの比較

- 正しい医薬品を取っていても間違えと表示される事がある

→調剤ミスは多量投与の処方時に起こることが多く、そのような処方が出た時は多忙になる

→多量の医薬品の場合、画像監査が誤認識を起こすことが多い

→多忙時にトレイに綺麗に医薬品を並べ何度も監査をするという無駄が生じる



忙しい



正しいのにエラー

MediMonitorは種類を誤認識をすることはない！



実質的な手間は変わらない！

# 他社の監査システムとの比較

|                | MediMonitor | T社 | A社 | M社 |
|----------------|-------------|----|----|----|
| 薬を取る手間         | ○           | ○  | ◎  | ○  |
| 監査の正確さ         | ◎           | ◎  | ○  | ◎  |
| 重量による錠数監査      | ○           | ○  | ○  | ×  |
| 複雑な調剤支援※1      | ◎           | ○  | ○  | △  |
| 写真付き監査履歴       | ○           | △  | ○  | ×  |
| 患者情報検索         | ○           | ×  | ×  | ×  |
| 医薬品情報検索        | ◎           | ×  | ×  | ×  |
| 在庫管理           | ○           | ×  | ×  | ○  |
| 棚卸し機能          | ◎           | ×  | ×  | ×  |
| データベース自動更新機能※2 | ○           | ×  | ×  | ×  |
| 高度なセキュリティ※3    | ○           | ×  | ×  | ×  |
| 薬局外での使用        | ◎           | ×  | ×  | ×  |
| 設置のやり易さ        | ◎           | △  | △  | ○  |
| 機器の大きさ         | ◎           | △  | △  | ○  |
| 停電時での使用        | ○           | ×  | ×  | ×  |
| 電話でのサポート       | △※4         | ○  | ○  | ○  |
| メールでのサポート      | ○           | △  | △  | △  |
| 価格             | ◎           | △  | △  | ○  |



MediMonitor



VS

※1 複数人対応、施設、予製、バラ、分包品の監査対応など

※2 オンラインで自動的に最新情報へアップデート

※3 ICカードやパスワードによるログイン監視機能

※4 有料出張サービスをご利用された方限定

# MediMonitorのセキュリティ

**MediMonitorはセキュリティ対策も万全！**



- ・データは暗号化済み
- ・個人情報厳格管理
- ・利用者を厳しく制限

※それでも不安なら個人情報を一切送信しない設定もできます

セキュリティ対策についての詳細情報はこちら

[https://medicalfields.jp/medimonitor\\_security/](https://medicalfields.jp/medimonitor_security/)



# 他社にはない優れた特徴

## すべての医薬品の監査

→通常の錠剤に加え、散剤、軟膏、水剤、外用を含めたすべての医薬品の監査に対応



## 患者検索&処方歴閲覧機能

→過去の処方情報を薬局外からでも検索し閲覧。メモ書きや写真の保存も可能



## 医薬品検索機能

→医薬品ごとの使用状況だけでなく、添付文書やインタビューフォームの閲覧も可能

## データベース自動更新機能

→自動的に最新の医薬品情報に更新(重量情報除く)※重量情報に関しては初回時のみ、確認画面が出てき、その場で自動的に上書き登録されます



# 他社にはない優れた特徴

## 散剤,軟膏,水剤に対応

→正確な重量監査が必要な医薬品は、専用の監査画面を自動的に表示。設定した分包数に合わせて分割し、1度に取得すべき重量の表示も可




## バラ、分包品に対応

→同じ医薬品で重量が異なる場合でも、それぞれの重量を登録し同時に監査可能 ※最大で1薬品に99パターン保存可



## 分割での監査

→処方日数が多い場合でも任意の日数で分割して監査可能

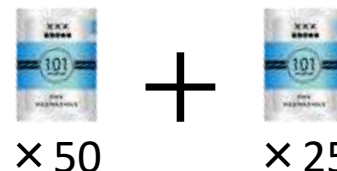

## 予製、施設を保存

→予製や施設の情報を保存して、必要な時に呼び出して監査可能 ※無制限で保存でき、検索にも対応



## 複数人での監査

→[1人の患者を複数人で監査]や[複数の患者を並行しての監査]も、各端末で可能。監査情報もリアルタイムで同期され、情報の変更も可 ※最大で1店舗あたり99台利用可能



# 他社にはない優れた特徴



## 高度なセキュリティ

→ICカードを使った認証、権限機能による利用者の厳格な管理



## WEBで確認、印刷

→専用のWEBページから監査履歴や在庫状況を表示し、印刷可能



## 停電時に使用可能

→停電時でも内蔵バッテリーとモバイル回線により使用可能



## カメラ自動撮影

→監査時に自動撮影するよう設定可能、撮影条件も選択可




## 音声による文字入力

→タッチ入力が苦手であっても音声による入力が可能



## 棚番号を自動作成、表示

→バーコードをかざすだけで薬の棚番を順に登録でき、監査時に棚番を表示可

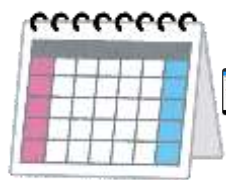

## 来局日の確認

→次回患者様が来る日を予想し一覧でカレンダー表示可能



## 設置場所を取らない

→コンパクトなスマホを使うことで何処でも設置可能


# アップデート

皆様、朗報です

監査システムに  
**棚卸し機能**  
が加わりました！


# MediMonitor棚卸しシステムとは

バーコードを読み込んで、在庫数を登録するだけで棚卸しができるシステムです

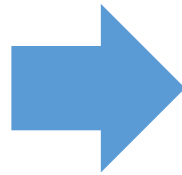

# MediMonitor棚卸しシステムとは

棚卸し情報を携帯端末で一括管理することが出来ます

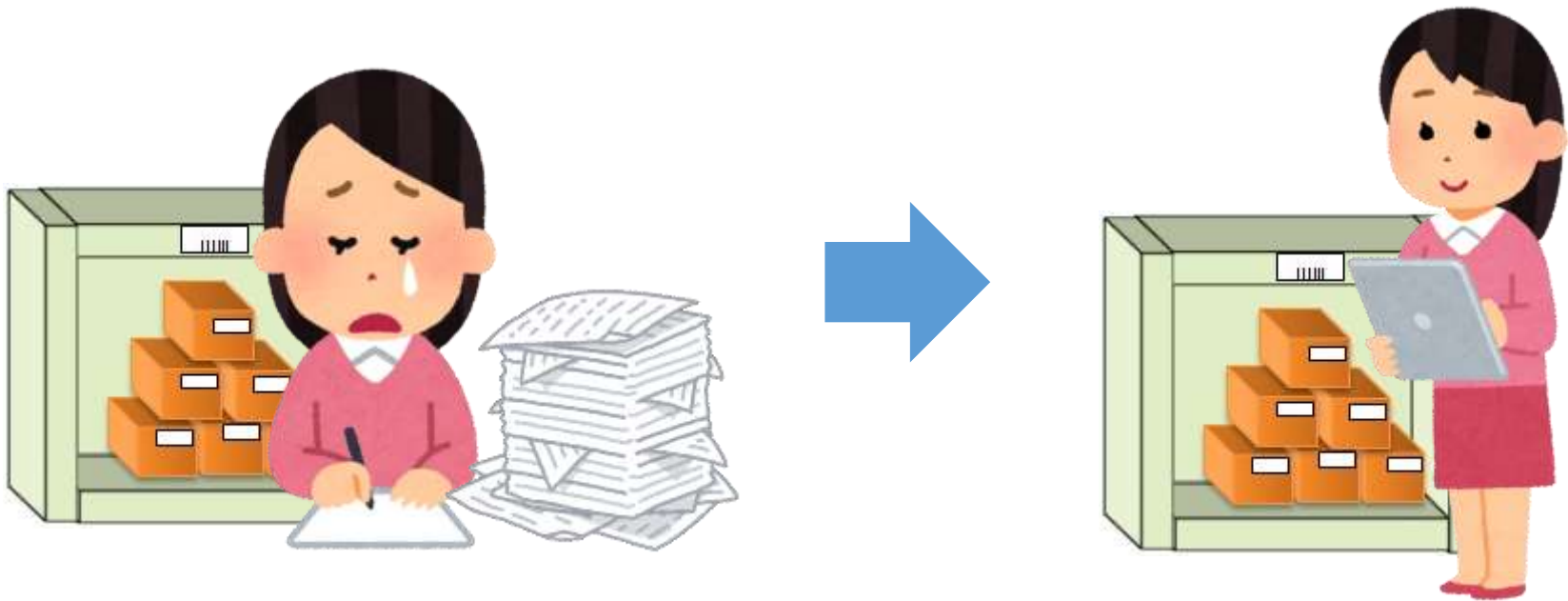

# 在庫数の登録方法



箱に記載されてる数

OR



直接入力

OR



薬を秤に載せる

## [種類]

- ・バーコードスキャン
- ・医薬品検索  
で特定します

## [数]

- ・かざしたバーコードの箱に記載されている数
- ・自分で入力
- ・秤の上に乗せて、登録された比重から計算された数

以上の3種類から登録できます



# 在庫数登録での特徴



100錠



500錠



1000錠



かざした箱によって区別して登録出来ます



# 今までの棚卸しの問題点

- ① 同じ種類の医薬品が別の場所にあった場合に合計する必要がある
- ② 数えた医薬品が処方された場合に再び数え直す必要がある
- ③ 複数人で棚卸しをした場合に紙だと情報が共有できない
- ④ 紙に数を書いてそれをExcelに入力するなど2度手間がかかる



すべて解決できます！

# MediMonitor棚卸しの特徴

## 同じ医薬品を合計できます

→同じ医薬品が別々の場所にあった場合でも自動的に計算して合計できます

2016-12-05 14:51:初めての棚卸 ▼ ア行 ▼ 設定

|   | A               | B                  |
|---|-----------------|--------------------|
| 1 | アシロバ錠 20mg :100 | アイミクス配合錠HD :500    |
| 2 | アレグラ錠 60mg :50  | アノプロリン錠 100mg :100 |
| 3 |                 |                    |

方向 → ▼ 単純追加 ▼ ENTER

棚情報画面

棚の場所に医薬品を登録します  
左上から順番に実際にある在庫数登録します

新規登録

25

キャンセル OK

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 . / ? ! Done

アレグラ錠 60mg □ バツ

498719910X 製造番号 テスト

2019 25 ×2

Feb 2020 秤 入力

Mar 2021

50 バツ0: 50 2020-02-25

この月 50 バツ0: 1352 バツ0: 合計 1402 バツ0:

閉じる 上書き 追加

登録画面

棚に登録すると自動的に同じ医薬品  
が他の場所にあるか計算します

# MediMonitor棚卸しの特徴

## 在庫の変動を反映します

→いつ棚卸しをしても未来や過去の時点の在庫数を求めることができます！

The screenshot shows the 'アレグラ錠60mg' (Alegra 60mg) inventory adjustment screen. It includes fields for '調整数' (Adjustment Number) set to -1352, '他種' (Other Type) set to 0, and date/time ranges for automatic calculation from 2015-12-05 14:5 to 2015-12-27 22:3. A checkbox for '自動在庫調整' (Automatic Inventory Adjustment) is checked. Below these are several rows of inventory data with columns for date, time, quantity, and name.

| 出          | 出時間   | 出数量    | 出薬剤名 |
|------------|-------|--------|------|
| 2015-12-15 | 出:28錠 | 江野 典江  |      |
| 2015-12-15 | 出:28錠 | 田村 茂   |      |
| 2015-12-15 | 出:28錠 | 田岡 茂江  |      |
| 2015-12-15 | 出:10錠 | 田子 美恵子 |      |
| 2015-12-15 | 出:10錠 | 佐々木 カ子 |      |

例えば12月27日22時時点の在庫が欲しい場合に12月5日の14時時点の薬局に存在する在庫を登録したとしても12月5日14時～12月27日22時までの在庫変動数を自動的に計算し12月27日22時時点の在庫数を算出することが出来ます。

これにより時間がある場合に少しずつ棚卸しをし、棚卸しの締め日までにすべての医薬品に対して登録を済ましておけば棚卸し日に棚卸しをすることなく棚卸し日の在庫数を出力することが出来ます。

在庫変動の調整

# MediMonitor棚卸しの特徴

## 在庫状況を共有できます

→複数端末で棚卸しをした場合でも同じ画面が表示でき、数も合計されます

2016-12-05 14:51:初めての棚卸 ▼ ア行 ▼ 設定

|   | A                                                                                                 | B                                                                                                    |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |  アジルバ錠 20mg :100 |  アイミクス配合錠HD :500    |
| 2 |  アレグラ錠 60mg :50  |  アノプロリン錠 100mg :100 |
| 3 |                 |                    |

方向 → ▼ 単純追加 ▼ ENTER

端末1

=

2016-12-05 14:51:初めての棚卸 ▼ ア行 ▼ 設定

|   | A                                                                                                 | B                                                                                                      |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |  アジルバ錠 20mg :100 |  アイミクス配合錠HD :500    |
| 2 |  アレグラ錠 60mg :50  |  アノプロリン錠 100mg :100 |
| 3 |               |                    |

方向 → ▼ 単純追加 ▼ ENTER

端末2

同じ画面で作業

# MediMonitor棚卸しの特徴


そのままExcelに表示できます

→棚卸しした情報はリアルタイム反映され簡単にExcelに表示できる形式でダウンロードできます



The screenshot shows a web application interface with a sidebar on the left and a main content area. The main area displays a table of inventory items with columns for item name, code, quantity, and price. The table is titled '棚卸情報' (Inventory Information).

| 品名                        | コード          | 数量   | 単価       |
|---------------------------|--------------|------|----------|
| アクトネル錠17.5mg              | 8999019F2022 | 15   | 6210.5   |
| アスタッククリーム1%               | 2655710N1030 | 108  | 4071.6   |
| アダラートCR錠40mg              | 2171014G5025 | 1000 | 55800    |
| アレグラ錠60mg                 | 4490023F1024 | 246  | 15965.4  |
| アンブロキソール塩酸塩内用液0.75%「タイヨー」 | 2239001S1090 | 500  | 2750     |
| アンブラグ錠100mg               | 8399006F2022 | 245  | 27685    |
| エリキウス錠2.5mg               | 3339004F1029 | 499  | 74351    |
| カモスタットメシル酸塩錠100mg「トーフ」    | 8999003F1360 | 100  | 1020     |
| コムタン錠100mg                | 1169014F1021 | 504  | 109519.2 |
| ザンタック錠150                 | 2325002F1194 | 44   | 1482.8   |
| シグマート錠2.5mg               | 2171017F1028 | 100  | 1400     |

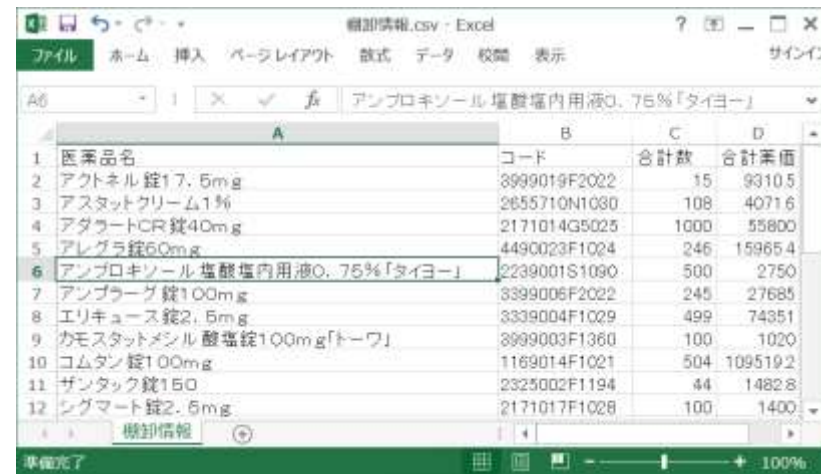

The screenshot shows an Excel spreadsheet with the same data as the web application. The spreadsheet is titled '棚卸情報.csv - Excel' and has columns for item name, code, quantity, and price. The data is organized in a table with 12 rows.

|    | A                         | B            | C    | D        |
|----|---------------------------|--------------|------|----------|
| 1  | 医薬品名                      | コード          | 合計数  | 合計単価     |
| 2  | アクトネル錠17.5mg              | 8999019F2022 | 15   | 9310.5   |
| 3  | アスタッククリーム1%               | 2655710N1030 | 108  | 4071.6   |
| 4  | アダラートCR錠40mg              | 2171014G5025 | 1000 | 55800    |
| 5  | アレグラ錠60mg                 | 4490023F1024 | 246  | 15965.4  |
| 6  | アンブロキソール塩酸塩内用液0.75%「タイヨー」 | 2239001S1090 | 500  | 2750     |
| 7  | アンブラグ錠100mg               | 8399006F2022 | 245  | 27685    |
| 8  | エリキウス錠2.5mg               | 3339004F1029 | 499  | 74351    |
| 9  | カモスタットメシル酸塩錠100mg「トーフ」    | 8999003F1360 | 100  | 1020     |
| 10 | コムタン錠100mg                | 1169014F1021 | 504  | 109519.2 |
| 11 | ザンタック錠150                 | 2325002F1194 | 44   | 1482.8   |
| 12 | シグマート錠2.5mg               | 2171017F1028 | 100  | 1400     |

専用WEBサイトからダウンロード

Excelで表示

# MediMonitorで効率的な棚卸し

- ① 数の登録を**簡単**に行なえます
- ② 複数端末を**同じ画面**で棚卸しが出来ます
- ③ 棚卸し時点の**在庫数を計算**できます
- ④ 在庫状況をExcelに**ダウンロードして確認**できます
- ⑤ 合計薬価を**自動的に計算**できます



**効率的な棚卸しが可能！**

# MediMonitorは在庫管理も可能

## さらに在庫管理にも対応！

投薬以外の薬の入出庫を登録すると自動的に在庫数を計算！

※患者への投薬は自動的に出庫扱いとして登録されます



投薬以外の薬の  
入出庫を登録する

棚卸し情報を登録



その後の入庫出庫情報を登録



在庫数を管理可能

# MediMonitorの無料ダウンロード

今なら1ヶ月無料体験できます！

**無料ダウンロードはこちら！**

<https://medicalfields.jp/medimonitor/>





# お問い合わせ

導入のご相談、ご要望やご意見などが  
ありましたら遠慮なくご連絡下さい！

✉ info@medicalfields.jp

メディカルフィールズ



ご覧いただき  
ありがとうございました。



メディカルフィールズ  
Medical Fields